

PEAK FLOW

Peak Flow: Mini-Wright Digital Download

*Mini-Wright*TM
DIGITAL




Clement Clarke, Hersteller der Mini-Wright Peak Flow Produktreihe bietet Ihnen 'Gold Standard' Produkte für das Asthma Management.

Das neueste Mitglied in dieser Reihe ist das Mini-Wright Digital Download, es misst nicht nur den Peak Flow (PEF) sondern auch die Einsekundenkapazität (FEV1). Dies ermöglicht nun auch COPD-Patienten wie Asthma-Patienten ein zuverlässiges Management Ihrer Therapie. Durch die optional erhältliche Download-Station ist eine Speicherung und Verwaltung von Patientendaten möglich.

- Ausgelegt für das Asthma-Monitoring
- Screening Gerät für COPD Patienten
- Messung von Peak Flow (PEF) und Einsekundenkapazität (FEV1)
- Geeignet für Erwachsene und Kinder
- Für den Gebrauch von mehreren Personen durch Ventil-Mundstücke geeignet.
- PEF und FEV1 Normwerte einstellbar
- Speicherkapazität von 240 PEF und 240 FEV1 Messungen
- Wasserfest für einfache Desinfektion
- Einfach zu bedienen durch nur eine Taste.
- Ideal für elektronisches Peak Flow Tagebuch
- Möglichkeit zum Herunterladen von Daten für die Speicherung im PC
- Leicht und Kompakt
- Individuelle Ausführungen bei großen Mengen möglich

Mini-Wright Digital Software

- Einfache Software für den Gebrauch mit dem Mini-Wright Digital
- Übersicht und Trend der getätigten Messungen
- Herunterladen der Daten via USB durch die Basisstation auf jeden PC
- Datum und Zeit wird automatisch gespeichert
- Daten können in Graphiken und Tabellen aufbereitet werden
- Verschiedene Möglichkeiten der Datenauswahl(z.B. nur alle Vormittags-Messungen)
- Mini-Wright Digital kann durch die Mini-Wright Digital Software konfiguriert werden(Normwerte, etc.).
- Aufbau einer Patienten-Datenbank möglich

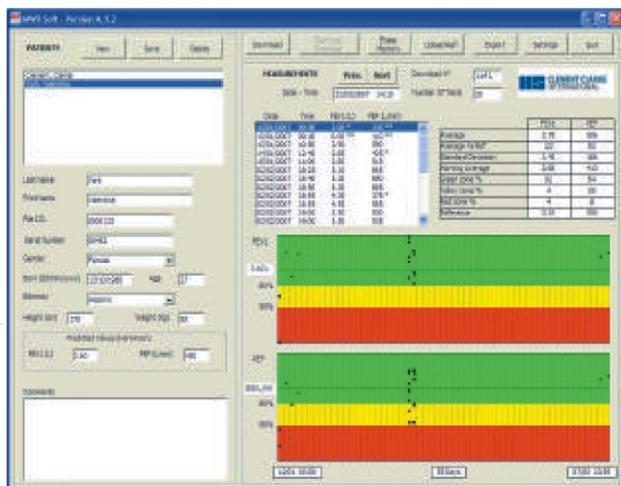

www.clement-clarke.com




CLEMENT CLARKE
INTERNATIONAL

Engineered for Life

TOTAL RESPIRATORY SOLUTIONS

Purchase this on our E-Shop www.clement-clarke.com/shop



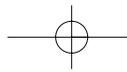

Technische Daten

Abmessungen: 11,4 x 4,4 x 2,9 cm
 Gewicht: 54 Gramm
 Messbereich:
 PEF 60 –850 L/Min
 FEV1 0,6 –8,00 Liter

Messgenauigkeit:

PEF +/- 6% oder 10 L/Min
 FEV1 +/- 3,5 % oder 0,10 Liter

Anzeige:

PEF 5,0 L/Min
 FEV1 0,05 Liter

Max. Widerstand zum Fluss 2,5 cm H₂O/L/sec unter 14 L/sec (0,25 Kpa @ 840 L/Min)

Zoning Grenzwerte:

Grün/Gelb 80%
 Gelb/Rot 50%

Speicher:

PEF 240 Messungen
 FEV1 240 Messungen
 Stromversorgung: 3V Knopfzelle (nicht wechsel- und aufladbar)

Lebensdauer Batterie

2 Jahre (basierend auf 2 Tests pro Tag mit jeweils 3 Messungen)

Artikel-Nummer

Mini-Wright Digital: 3120002

Verbrauchsartikel



Ventil-Mundstücke

Ermöglicht den Gebrauch von Peak Flow Metern für mehrere Personen. Hilft eine Cross Infektion zu vermeiden.

Artikel-Nummer

Einmal Ventil-Mundstücke Erwachsene
 Karton mit 100 Stück (gepackt 5x 20 Stück) 3122062
 Karton mit 200 Stück 3122064
 Karton mit 500 Stück 3122066



Einmal-Mundstücke

Kostengünstige Mundstücke für die Benutzung von mehreren Personen

Artikel-Nummer

Einmal-Mundstücke Erwachsene
 Karton mit 100 Stück (gepackt 5x 20 Stück) 3125030
 Karton mit 500 Stück 3122003

Bei Verwendung der Einmal Mundstücke wird das Reinigen des Peak Flow Meters zwischen den Messung empfohlen.

Clement Clarke ist bestens bekannt durch das Angebot an präzisen, genauen und zuverlässigen Produkten für die Diagnose, Überwachung and Behandlung von Atemwegserkrankungen.

Clement Clarke wird die Entwicklung fortsetzen das Produktsortiment in den Bereichen Asthma, COPD, Raucherentwöhnung, Mucoviszidose und Allergie zu erweitern, um Ihnen die Total Respiratory Solution zu bieten.



DISTRIBUTED BY:

www.clement-clarke.com

PEAK FLOW

