

RespiPro White Anti-COVID-19 Schutzmaske

Hoher Partikelschutz dank Nanofaser-Filter

Die **Respilon® RespiPro® White Anti-COVID-19 Schutzmaske** bietet Schutz vor sämtlichen Partikeln, Feinstaub und schwebenden Allergenen wie Schimmelsporen, Pollen- oder Hausstaubmilbenallergenen, Bakterien und Viren. Zur Filterung der Schwebepartikel wird in der Halbmaske eine Nanofasermembran, die **Respilon® RFT Membran**, verwendet. Diese Nanofaserschicht ist nicht laminiert und bietet daher eine sehr hohe Atmungsaktivität.


Die **RespiPro® White Anti-COVID-19 Schutzmaske** ist eine zertifizierte Anti-COVID-19 Schutzmaske und entspricht den WHO Empfehlungen gemäß EU-Verordnung PPE-R/02.075 Version 2 für diese spezielle Verwendung. Dies bedeutet, dass der minimale Schutzfaktor der Halbmaske jener einer FFP2 Klassifizierung gemäß EN 149:2001+A1:2009 entspricht.

Das spezielle Design und das Material der Maske machen sie einzigartig und durch die hocheffiziente Nanofaserschicht, deren Filtereigenschaft von 99,9% im Bezug auf Viren und Bakterien von den Nelson Laboratories (Salt Lake City, U.S.A) geprüft und bestätigt wurden, zur perfekten Wahl für alle, die sich gegen Krankheitserreger in der Luft schützen möchten.

Die Schutzmaske ist somit besonders gut geeignet für Ärzte, Feuerwehr, Polizei, Laborpersonal und ähnliche Berufsgruppen. Die Maske ist mit nur 4g Gesamtgewicht außerdem sehr leicht.



Die Maske besteht aus insgesamt 3 Lagen: Der hocheffizienten mittleren **Respilon® RFT** Nanofasermembran, einer weichen und hautfreundlichen inneren Vlieschicht und einer äußeren weißen Schutzschicht aus Polypropylen.

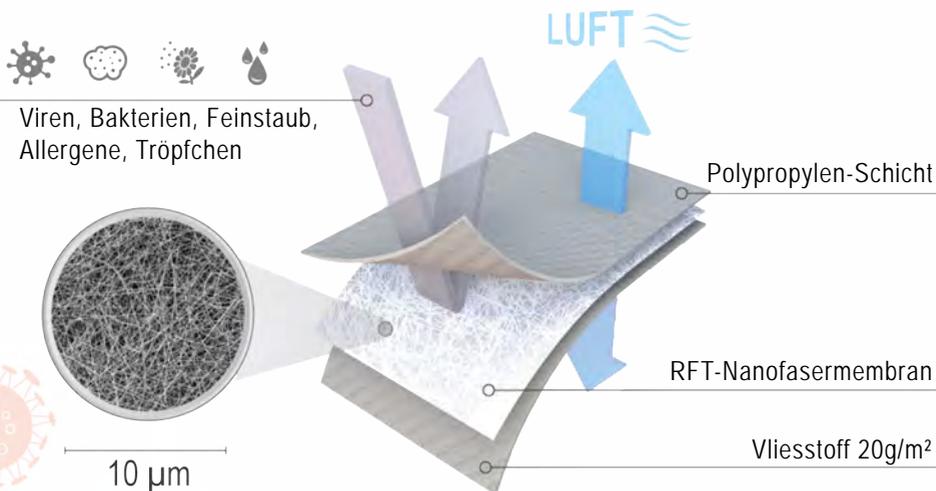

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Masken

- ▶ Besonders leicht mit nur 4g Gesamtgewicht
- ▶ Zertifizierte Anti-COVID-19 Schutzmaske
- ▶ Nanofasermembran filtert 99,9% Viren, Bakterien, Allergene und Feinstaub
- ▶ Idealer Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Arzt, Einkaufen oder in der Arbeit
- ▶ Hohe Atmungsaktivität
- ▶ Nasenbügel zur bestmöglichen Abdichtung im Nasenbereich
- ▶ Weiches und hautfreundliches Innenmaterial für noch besseren Tragekomfort
- ▶ Clip für Anpassung an individuelle Kopfformen
- ▶ Einfache Anwendung

Ihr Fachhändler

